



**Manuale d'Uso
Accessorio per lavaggio Vaginale
IDROVAG BIO FLUFF®**



Regolamento UE 2017/745 e s.m.i.

per Dispositivo Medico Bio Fluff®



AVVERTENZA GENERALE: Si raccomanda di leggere con attenzione questo Manuale d'Uso prima di utilizzare l'Accessorio e conservarlo per ulteriori consultazioni.

INTRODUZIONE

LAVAGGIO VAGINALE


Grazie all'utilizzo del Dispositivo Medico **Idrovag Bio Fluff**, collegato al Gruppo Regolatore del Dispositivo Medico Bio Fluff domestico, è possibile eseguire il lavaggio Vaginale, veicolando l'acqua all'interno della vagina. Tale operazione consente la rimozione di eventuali elementi patogeni, per un profondo lavaggio.

Il lavaggio vaginale si può associare in differita alle sedute di idrocolonterapia, in modo da agire in maniera sinergica nel ripristino dell'ecosistema vaginale.

Con il lavaggio vaginale l'acqua, mediante una piccola sonda, viene introdotta nella vagina a temperatura variabile e pressione controllata.

La continua circolazione del liquido in entrata e in uscita, oltre a generare un beneficio e delicato messaggio perfettamente tollerato dalla paziente, è in grado di irrigare in modo insostituibile le pareti vaginali asportando a fondo con la sua azione detergente ogni residuo anormale od infiammatorio.

IDROVAG BIO FLUFF (Art. A874/KIDV)

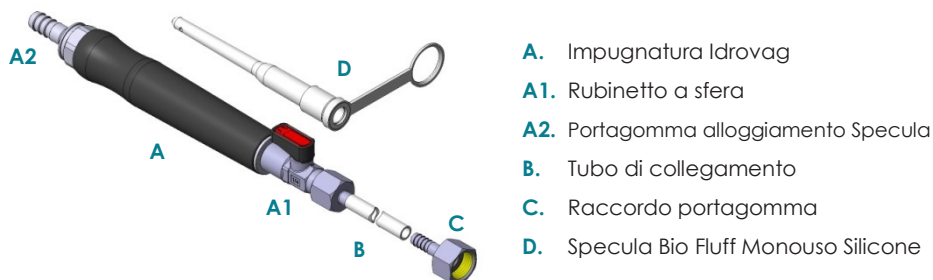

Il Dispositivo Medico **Idrovag Bio Fluff** che avete acquistato è la versione moderna, sicura e certificata per praticare il **lavaggio vaginale**.

Il prodotto è esclusivo, garantito secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/745 e s. m. i. sui Dispositivi Medici.

Il Sistema di Gestione per la Qualità è conforme ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 13485:2016**.

Questo Manuale d'Uso contiene informazioni importanti che sono necessarie per l'uso del Dispositivo Medico **Idrovag Bio Fluff** in modo sicuro e semplice.



ATTENZIONE!

LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE D'USO NON SONO CONSIGLI MEDICI E NON SOSTITUISCONO IL PARERE MEDICO!

COMPONENTI dell'IDROVAG BIO FLUFF

L'Idrovag Bio Fluff è composto da:

- Impugnatura, rubinetto a sfera, portagomma per alloggiamento Specula Bio Fluff Monouso Silicone, tubo di collegamento e raccordo portagomma
- Confezione N° 5 Dispositivo Medico Specula Bio Fluff Monouso Silicone

Nella confezione troverete inoltre:


- Il presente Manuale d'Uso completo di Certificato di Garanzia
- Copia della Dichiarazione di Conformità dell'Accessorio Idrovag Bio Fluff
- Copia della Dichiarazione di Conformità del Dispositivo Medico Specula Bio Fluff Monouso Silicone
- Un sacchetto per riporre il dispositivo

Materiale di consumo:

- Specula Bio Fluff Monouso Silicone (Art. 748-S)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO

1. Avvitare il raccordo portagomma (**C**) all'uscita del raccordo filettato del Gruppo Regolatore Bio Fluff, verificando la presenza della guarnizione di tenuta;
2. Inserire l'estremità libera del tubo di collegamento (**B**) sul portagomma all'uscita del Gruppo Regolatore;
3. Aprire la bustina con la salviettina disinfettante fornita in dotazione e pulire la Specula.
4. Posizionare una Specula Bio Fluff Monouso Silicone sul portagomma di alloggiamento (**A2**) presente sull'Impugnatura, spingendola delicatamente fino a battuta;
5. Infilare sulla Specula l'anello dell'Inserto di Bloccaggio, l'Inserto stesso e spingerli fino alla base. Agganciare l'anello nella sede del portagomma di alloggiamento (**A2**);

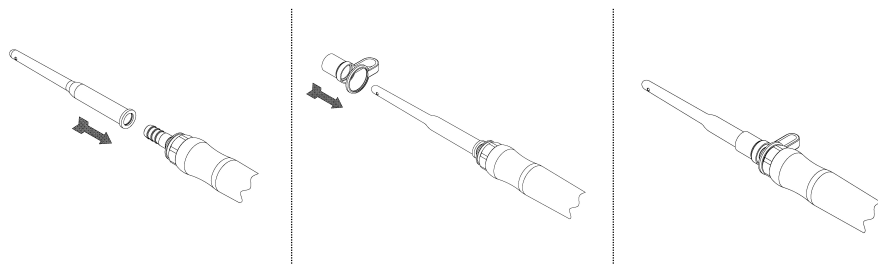

6. Regolare la temperatura ed il flusso dell'acqua come indicato nel manuale d'uso del Dispositivo Bio Fluff;

7. Inserire la Specula in vagina ed aprire l'acqua mediante il Rubinetto a sfera (A1);
8. Al termine del trattamento, dopo aver sfilato la Specula dalla vagina:
 - sfilare l'Inserto di Bloccaggio (*sganciando l'anello*), togliere la Specula Bio Fluff Monouso Silicone e **gettare il tutto**;
 - staccare il tubo di collegamento (*o svitare il portagomma*) dal Gruppo Regolatore;
 - lavare accuratamente con abbondante acqua corrente l'Impugnatura e successivamente disinfettarla (*con qualsiasi disinfettante non corrosivo*).
 - Infine posizionarla in verticale per farne defluire completamente l'acqua prima di riporla nella confezione (*o nel sacchetto in dotazione*).

ATTENZIONE!



Al termine del trattamento, la Specula Bio Fluff Monouso Silicone, ed il relativo Inserto di Bloccaggio, VANNO SEMPRE ELIMINATI poiché dopo il lavaggio diventano una fonte di batteri nocivi.

Pertanto NON SI DEVONO ASSOLUTAMENTE RICICLARE

MANUTENZIONE

Le caratteristiche e le prestazioni originarie dell'Accessorio IdroVag BIO FLUFF acquistato, possono essere mantenute solo svolgendo regolarmente le seguenti attività di manutenzione:

• Manutenzione ordinaria

Al termine di ogni lavaggio, dopo aver **tolto e gettato** la Specula Monouso Silicone, lavare accuratamente l'impugnatura con abbondante acqua corrente e successivamente disinfettarla (*con qualsiasi disinfettante non corrosivo*). Infine posizionarla in verticale per farne defluire completamente l'acqua prima di riporla nella confezione (*o nel sacchetto impermeabile in dotazione*). Il vostro Dispositivo è così pronto per un utilizzo futuro.

• Manutenzione straordinaria

Se si dovessero verificare problemi non previsti e descritti dal presente Manuale d'Uso, contattare l'assistenza.

DURATA DI VITA

L'Accessorio per lavaggio Vaginale Idrovag Bio Fluff, in condizioni normali di utilizzo e conservazione (*condizioni di stoccaggio -40 ÷ +70 °C*), e seguendo le indicazioni d'uso e manutenzione fornite, ha una durata di vita minima di cinque anni dal primo utilizzo, decorsi i quali dovrà essere sottoposto a revisione da parte di un tecnico specializzato per la verifica dello stato di usura dei componenti ed eventuale loro sostituzione.

ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza di natura tecnica e/o funzionale potrete scrivere a:

NATURLIFESTYLE s.r.l.
Via Brescia, 41/M-N
25065 - Lumezzane (BS)
ITALY

oppure scrivere una mail a:

info@naturlifestyle.it

oppure telefonare al numero:

+39 030 5785026

oppure mandare un fax a:

+39 030 5785092



TAGLIANDO DI GARANZIA DA RITAGLIARE E SPEDIRE A:

GNALI BOCIA S.R.L. - Att.ne Resp. Qualità
Via Brescia, 41/M-N
25065 - Lumezzane (BS)
Italy



ATTENZIONE!

Allegare la fotocopia del documento di acquisto (fattura/scontrino)



Nome e Cognome:		
Indirizzo (via e numero civico):		
C.A.P.:	Città:	Provincia:
Tel.:		e-mail:

Articolo: Idrovag Bio Fluff®	Matricola N°:
Data di acquisto:	Fattura/scontrino N°:

Distributore / Rivenditore:		
Indirizzo (via e numero civico):		
C.A.P.:	Città:	Provincia:
Tel.:		e-mail:

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'Accessorio per lavaggio Vaginale **Idrovag Bio Fluff®**,

matricola n° _____, acquistato in data _____,
presso (indicare in tabella i dati del Distributore/Rivenditore):

Ragione Sociale:		
Indirizzo (via e numero civico):		
C.A.P.:	Città:	Provincia:
Tel.:	e-mail:	

è garantito per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (che deve essere documentata dalla fattura/scontrino rilasciato all'atto dell'acquisto e dalla restituzione del Tagliando di Garanzia).

Per Garanzia si intende la sostituzione/riparazione gratuita delle parti che compongono l'Accessorio, riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

La garanzia ha validità solo ed esclusivamente se l'Accessorio è utilizzato con Dispositivi e Ricambi originali Bio Fluff®.

Non sono coperte da Garanzia le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione e/o manutenzione, di uso improprio, di manomissione, di interventi di manutenzione/riparazione eseguiti da personale non autorizzato, di mancata osservanza delle indicazioni presenti nel Manuale d'Uso, di trasporto effettuato senza le dovute cautele, di eventi naturali e azioni dolose o colpose di qualsiasi genere e di circostanze che non sono dovute a difetti di fabbricazione dell'Accessorio.

Sono inoltre escluse dalla Garanzia le prestazioni inerenti all'installazione/allacciamento alla rete idrica.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente Manuale d'Uso e concernenti le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'Accessorio.

La riparazione dell'Accessorio avverrà esclusivamente presso un nostro Centro di Assistenza.

Eventuali riparazioni/sostituzioni nel periodo di Garanzia non ne comportano l'estensione. Se non in Garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente; verranno inoltre addebitati i costi di riparazione/sostituzione (*mano d'opera*), oltre ai costi dei componenti riparati/sostituiti.

In ogni caso è esclusa la sostituzione dell'intero Accessorio.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

www.naturlifestyle.it

Ist. (FT P 21) KIDVBF - Rev. 06 del 12/05/2025

FABBRICANTE :

GNALI BOCIA S.R.L.

Via Brescia, 41/M-N
25065 - Lumezzane (BS)
ITALY

DISTRIBUTORE :

NATURLIFESTYLE S.R.L.

Via Brescia, 41/M-N
25065 - Lumezzane (BS)
ITALY

